

ROMEDIC



HAAL MEER UIT HET LEVEN, ONTDEK VRIJHEID

Freeway Elite, met deze mobiele vernevelaar bent U onafhankelijk om te vernevelen waar en wanneer U maar wilt. Onze nieuwste mobiele vernevelaar is uw perfecte reispartner.

Compact, lichtgewicht en uiterst betrouwbaar. Als U het meeste uit het leven wilt halen.

Freeway[®] elite



MOBIELE VERNEVELAAR

Freeway® elite

Freeway Elite is een stijlvolle, kleine mobiele vernevelaar die U in staat stelt te kunnen vernevelen waar en wanneer U wilt. Dit luxueuze systeem inclusief Sidestream medicijnjet bevat alles wat U nodig heeft voor een efficiënte verneveling. De Sidestream levert een snelle (2.5 ml binnen 6 minuten) en accurate toediening (80% van alle nevel deeltjes bereiken de longen) van alle gangbare voorgeschreven inhalatie-medicatie, keer op keer.

Door verbeterde accu technologie (Nickel Metaal Hydride) kan de Freeway Elite 6 x 6 minuten vernevelen voordat de accu opnieuw dient opgeladen te worden. De accu kan opgeladen worden met de bijgeleverde adaptor of via de 12V DC kabel. (auto aansteker)

De Freeway Elite kan ook direct aan een stroombron gekoppeld worden zonder dat er gebruik van de accu wordt gemaakt.

De vrijheid om te kiezen waar en wanneer U wilt vernevelen maakt de Freeway Elite tot uw ideale reispartner. Het handige draagtasje is ontworpen zodat U alles voor uw behandeling kunt meenemen.

Accessoires bijgeleverd:

- Reusable Sidestream
- Netsnoerkabel inclusief adaptor
- Herlaadbare accu (Nickel Metaal Hydride)
- 12V DC (auto aansteker)
- Mondstuk
- Volwassen masker
- Kinder masker
- Gespiraliseerde Duratube
- Luchtfilter
- Draagtasje




Technische specificaties:

Gewicht:	0.53 kg zonder accu 0.86 kg met accu
Afmetingen:	130mm x 110mm x 53mm zonder accu 155mm x 110mm x 53mm met accu
Flow:	5,8 l/min
Druk:	+/- 0.6 l/min

Garantie informatie:

Compressor:	1 jaar
Accu:	6 maanden
Sidestream:	1 jaar

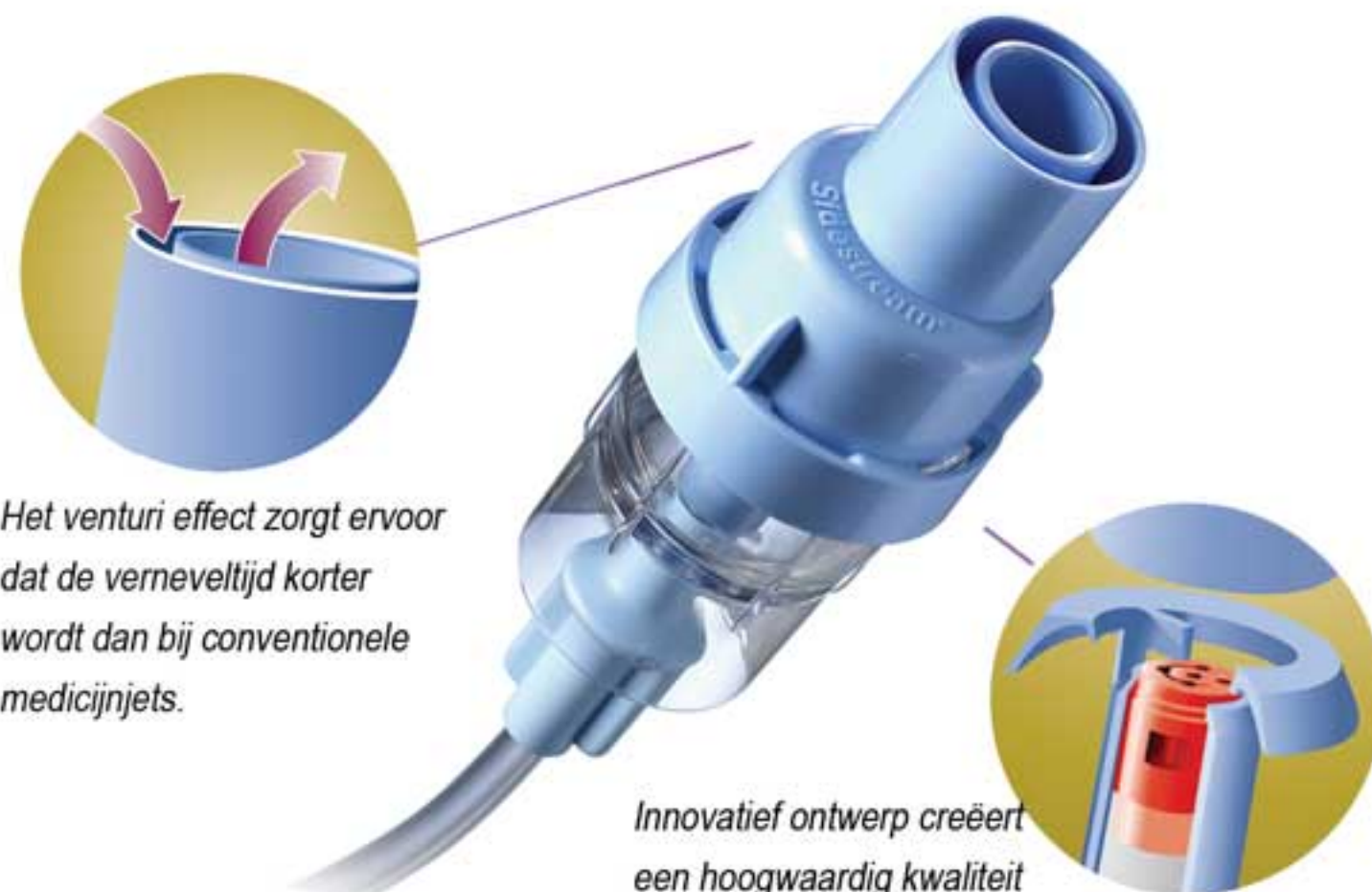

Het venturi effect zorgt ervoor dat de verneveltijd korter wordt dan bij conventionele medicijnjets.

Innovatief ontwerp creëert een hoogwaardig kwaliteit aerosol, keer op keer.

Reusable Sidestream hoog efficiënte medicijnjet

BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Aantal	Artikel nr
Vernevelsysteem		
Freeway Elite compleet pakket inclusief: - Sidestream vernevelset - accu, 230V adaptor en 12V DC adaptor	1	1029400
Accessoires		
Freeway Elite accu	1	1029401
Freeway Elite accu deksel	1	1029422
Freeway Elite 230V adaptor	1	1029423
Freeway Elite 12V DC adaptor	1	1029424
Freeway Elite draagtasje	1	1029425
Freeway Elite luchtfilter	1	1029426

